


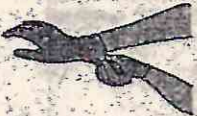
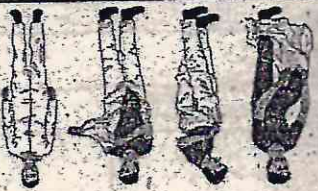

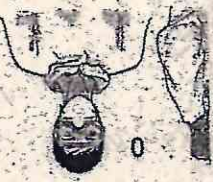


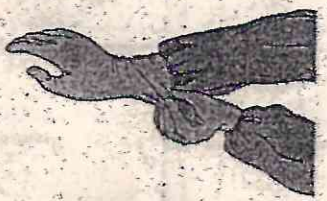
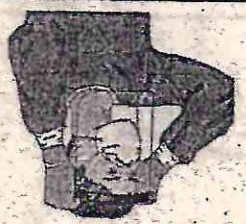


LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)

POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

N°	PROCEDIMIENTO	INGRESO AL VESTIER		ILUSTRACION
		ACCION	SI NO	
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, celular, etc)	✓	
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓	
3	Higiene de manos	Realice el Higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓	
4	Güantes Internos	Colocar guantes limpios internos	✓	
5	Traje Especial	Colocar Traje Especial, verificar que sea de su talla y asegure que al estirar los brazos no se corra en las mangas.	✓	
6	Respirador o Mascara N-95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tilla inferior dejando debajo de las orejas, luego suba la tilla superior dejando por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acorde sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓	
7	Mono gafas	Coloque mono gafas	✓	

11/10/2010

OPERADOR: CAROLINA IBARRA
 VERIFICADOR: Dora Valle

Defínase y verifique que todo está en su lugar				
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera		
11	Guantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antiruido	✓	
10	Careta o Protección Facial	Colóquese la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓	
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓	
8	Monogafas	Colóquese las monogafas	✓	

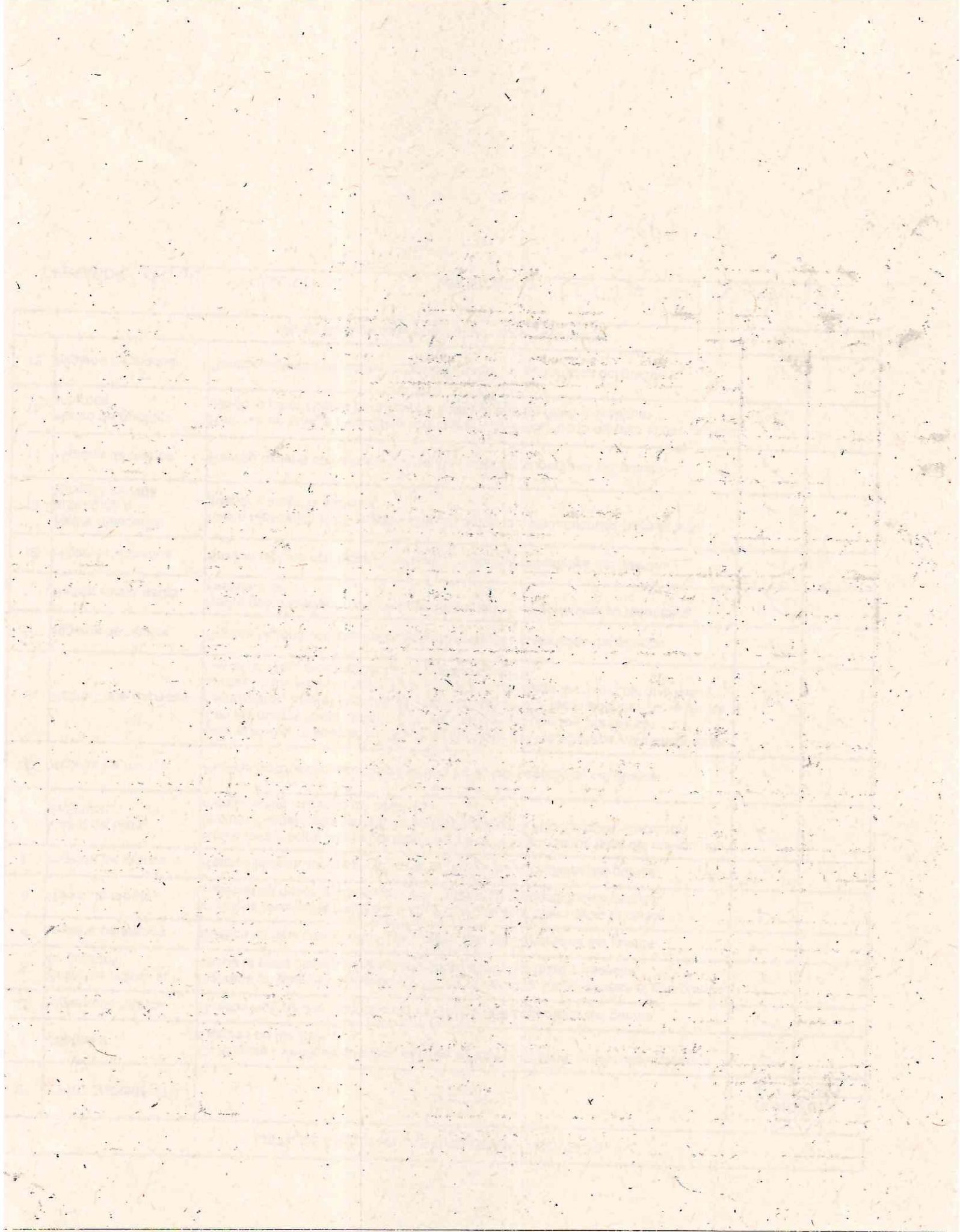
LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Incline levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hale y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y desarte. Recuerde marcar como residuo covid19	✓	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

OPERADOR: Rene Salazar VERIFICADOR: Wendy Valley

7/Sept/20
8/Sept/20
9/Sept/20



LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19

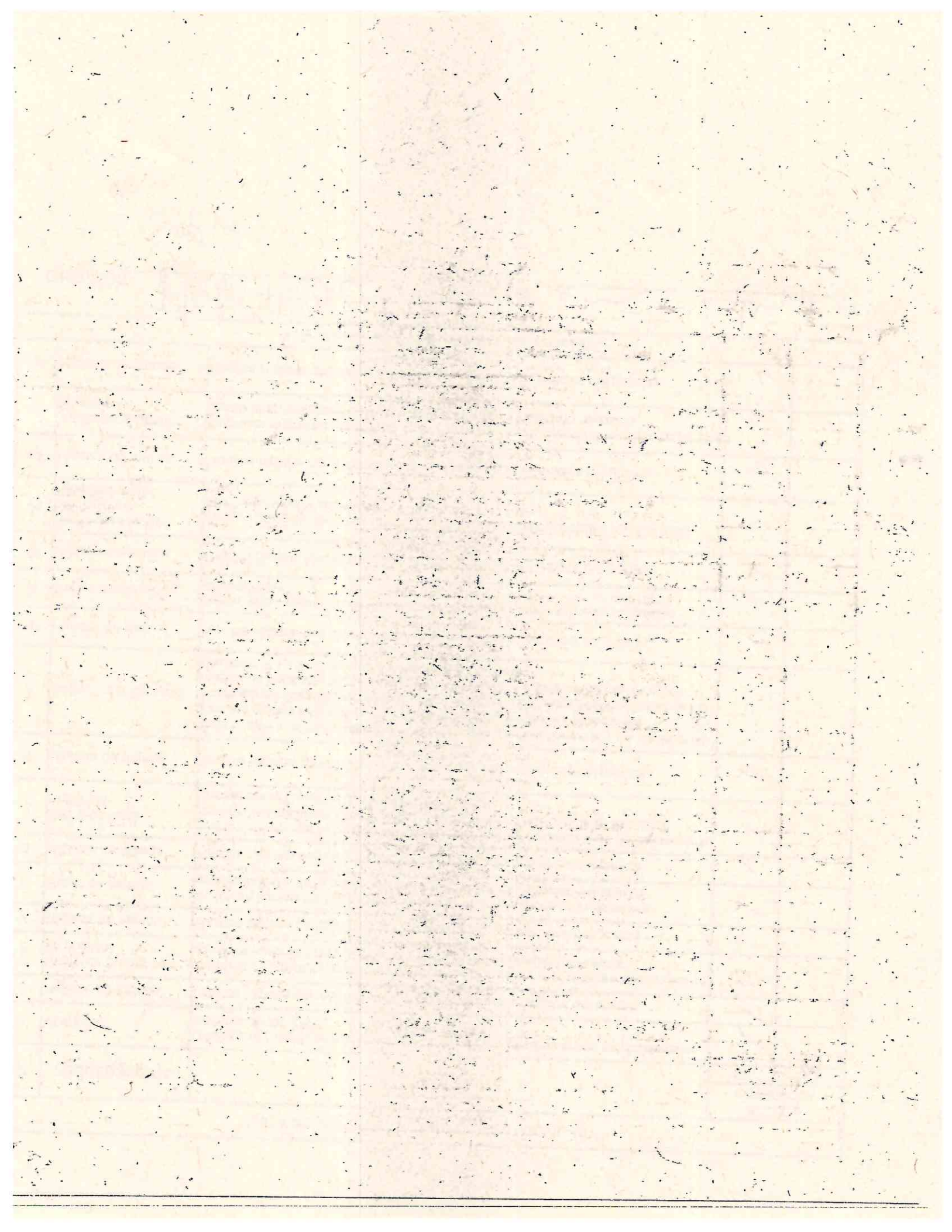
N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	
		SI	NO
1	Chequear	✓	
2	Higiene de manos	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	✓	
4	Higiene de manos	✓	
5	Retiro de careta	✓	
6	Higiene de manos	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	✓	
8	Higiene de manos	✓	
9	Retiro Traje Especial	✓	
10	Higiene de manos	✓	
11	Retirar mono gafas	✓	
12	Higiene de manos	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	✓	
14	Higiene de manos	✓	
15	Retiro de guantes internos	✓	
16	Higiene de manos	✓	




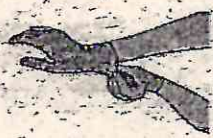

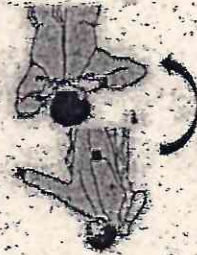

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

VERIFICADOR: Valery

OPERADOR: Edilio Herrera






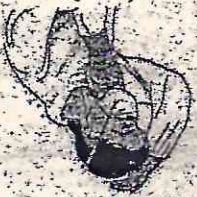
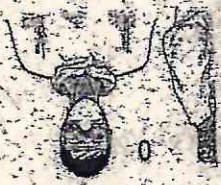
4
5
6
Sep/20



LISTA DE CHEQUEO AREA URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)				POSTURA DE EPP ANTE COVID-19	
Nº	PROCEDIMIENTO	ACCION	INGRESO AL VESTIR		ILUSTRACION
			SI	NO	
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadenas, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuenta con todos los elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Guañes internos	Colocar guantes internos.	✓		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de asegurarse antes de hacer este paso. Evite Caerse	✓		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga, anti-úlcera, sujetando sus respectivas tiras. Esta proteja el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujeta la copa con la mano, sujeta primero la tirilla inferior superior del lado de las orejas, luego cubre la tirilla superior del lado de las orejas. 2. Ajusta la tirilla de la copa sobre el dorso de la nariz. 3. Realice verificación de ajuste. 4. Sujeta la copa con la mano, sujeta primero la tirilla inferior superior del lado de las orejas, luego cubre la tirilla superior del lado de las orejas. 5. Realice verificación de ajuste. 6. Ajusta la tirilla de la copa sobre el dorso de la nariz. 7. Realice verificación de ajuste.	✓		

Des. Mayo
Fanny Ochoa

LISTA DE VERIFICACION		Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposicion los siguientes EPP.	
CANTIDAD	EPP	si	no
		DISPONIBLE	
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	✓	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta	✓	
1	Mascarilla N-95, o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Microport		✓

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, DO, HOSPITALIZACION, PARTOS, CAMARI)				
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION		ILUSTRACION
		SI	NO	
1	Retiro de accesorios (cadenas, pulseras, etc.)			
2	Verificar que cuentes con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.			
3	Higiene de manos Realiza el lavado de manos de acuerdo a protocolo establecido.			
4	Guañetes Internos Colocar guantes limpios internos			
5	Traje Especial Colocar Traje Especial. Verificar que sea de su talla y asegure que el cinturón de brazos no se comen en las mangas.			
6	Respirador o Mascarilla N-95 1. Sujetar la copa con la mano, subir primero la tibia inferior del arnés debajo de las orejas, luego subir la tibia superior del arnés por encima de las orejas. 2. Ajuste la tibia superior sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.			
7	Mono gasas Coloque mono gasas			

INGRESO AL VESTIR

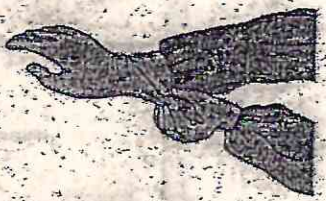
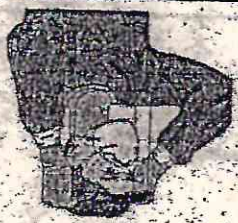
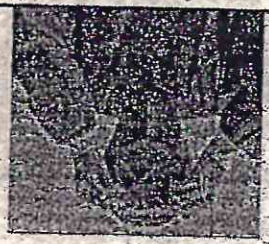

ACCION CORRECTA

ILUSTRACION

POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

343 / Sep 20 / 12 AM

OPERADOR: Dea. Vallejo
 VERIFICADOR: Dea. Vallejo

Deténgase y verifique que todo está en su lugar				
12	Verificar	Realice la colocación de la correa y finalmente ajuste de la parte trasera		
11	Gaunt Externos	Realice la colocación de los guantes externos asegurándose que quedan sobre el punto de la bata anti-émbudo	✓	
10	Correa o Protección Facial	Colóquese la correa, con cuidado para que no mueva el gorro desechable	✓	
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas	✓	
8	Monogafas	Colóquese las monogafas	✓	

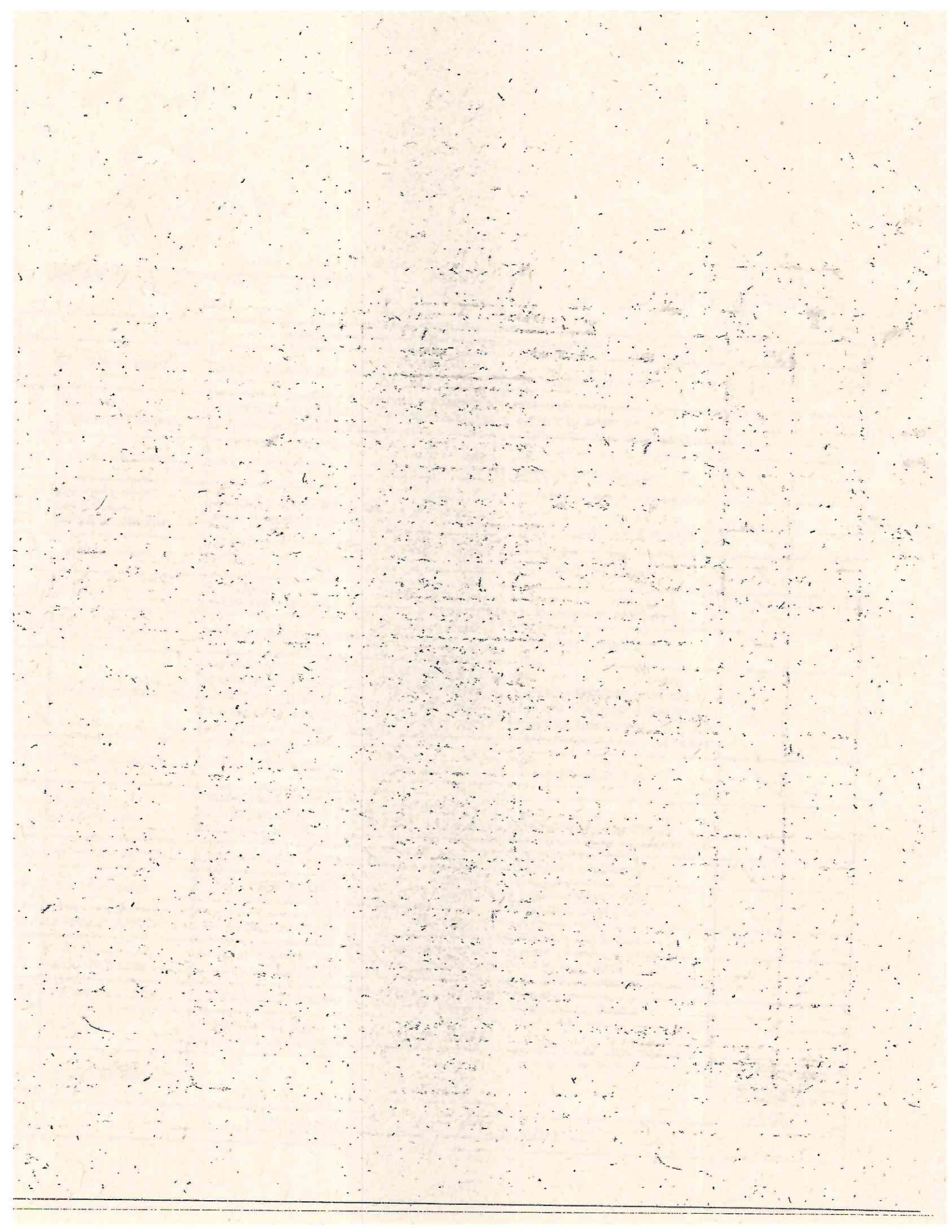
4
5
6 / Sep 20

OPERADOR: F. T. Sebastian Dye
 VERIFICADOR: D. Valdez

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

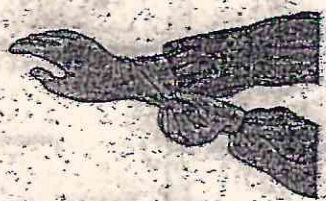
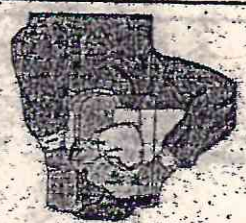

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	
		SI	NO
1	Chequear	✓	
2	Higiene de manos	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	✓	
4	Higiene de manos	✓	
5	Retiro de careta.	✓	
6	Higiene de manos	✓	
7	Retiro de Bata Antituido	✓	
8	Higiene de manos	✓	
9	Retiro Traje Especial	✓	
10	Higiene de manos	✓	
11	Retirar mono gafas	✓	
12	Higiene de manos	✓	
13	Retire mascarilla Respirador N95	✓	
14	Higiene de manos	✓	
15	Retiro de guantes internos	✓	
16	Higiene de manos	✓	

LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19



8
7
6
Sep 1990

OPERADOR: Amelcar Benitez
VERIFICADOR: Des. Dally

Defínase y verifique que todo está en su lugar				
Verificar	12	Realice la postura de la cara y finalmente ajuste de la parte trasera		
Guantes Externos	11	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antihielo	✓	
Careta o Protección Facial	10	Colóquese la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable	✓	
Gorro desechable	9	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las orejas	✓	
Monogafas	8	Colóquese las monogafas	✓	